


Silk'n®
Beautiful Technology

FaceTite Z

H2120

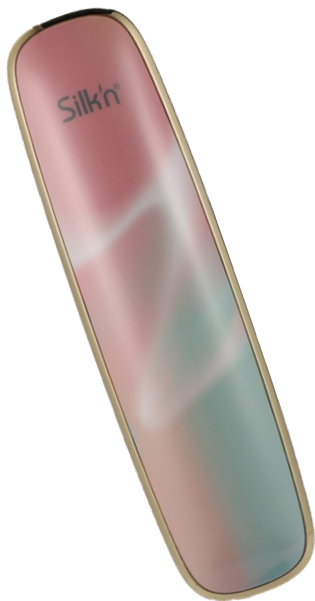

הוראות שימוש

1.	אזהרות.....	2
2.	התוויות נגד.....	4
3.	אמצעי בטיחות.....	6
4.	הכירו את המכשיר.....	7
4.1	תיאור המכשיר.....	7
4.2	למה מיועד המכשיר?.....	7
4.3	תכולת האריזה.....	7
4.4	חלקי המכשיר.....	8
4.5	הפעלה וחיווי.....	8
4.6	טעינת הסוללה.....	9
5.	בואו נתחיל!.....	10
5.1	אזורי טיפול.....	10
5.2	תוכנית טיפולים.....	11
5.3	למה לצפות מהטיפול.....	12
5.4	תופעות לוואי אפשריות.....	12
6.	הטיפול.....	13
7.	ניקיון, תחזוקה ואחסון.....	15
8.	איתור תקלות.....	16
9.	שירות לקוחות.....	17
10.	חומרים מתכלים.....	17
11.	אחריות.....	17
12.	מחזור.....	18
13.	תיוג.....	19
14.	סימנים וסמלים.....	19
15.	מפרט טכני.....	21
16.	עקומות הספק מוצא.....	23
17.	תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית.....	24



זהו מכשיר רב-עוצמה, ולכן יש להקפיד על הוראות הבטיחות בזמן השימוש בו. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני השימוש הראשון, ולשמור אותו לשימוש עתידי. הקפידו לקרוא את כל האזהרות, התוויות הנגד ואמצעי הבטיחות לפני השימוש, ופעלו לפיהן בקפידה. אנו ממליצים לקרוא את ההוראות לפני כל טיפול.

- הקפידו תמיד שידיכם יהיו יבשות לפני הפעלת המכשיר, נגיעה בתקע, או חיבור המכשיר לחשמל.
- אין להניח או לאחסן את ספק הכוח במקום שממנו הוא עלול ליפול או להיגרר לתוך כל סוג של נוזל.
- יש לטעון את הסוללה אך ורק באמצעות ספק הכוח שהגיע עם מכשיר זה.
- אין להשתמש בספק הכוח אם הוא נפל לתוך נוזל.
- לאחר טעינת הסוללה, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
- יש להרחיק את המכשיר, כולל כל החלקים והאביזרים הנלווים, ממשטחים חמים.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל.

● אין לנסות לבצע שינויים במכשיר, לפתוח אותו או לתקן אותו. אתם עלולים לחשוף את עצמכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לעצמכם נזק חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות שלכם.

● אין להשתמש במכשיר אם החלקים או האביזרים לא סופקו על ידי היצרן כפי שהוגדר במדריך זה, או אם הם פגומים באופן כלשהו, אינם פועלים כראוי, או אם אתם רואים או מריחים עשן. במקרה כזה, הפסיקו את השימוש במכשיר ופנו למוקד שירות הלקוחות.

● אין לנקות את חלקי המכשיר באמצעות מדיח כלים.

● אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה.

● אין לאפשר לילדים לשחק עם האריזה של המכשיר. הם עלולים להיפצע מחומרי האריזה או לבלוע את החלקים הקטנים ולהיחנק.

● המוצר מכיל סוללה שאינה ניתנת להחלפה.

● מכשיר זה תוכנן ונבדק כך שיעמוד בתקנים של הפרעות אלקטרומגנטיות, הפרעות אלקטרוסטטיות והפרעות לתדרי רדיו. אף על פי כן, ייתכן שתיגרם הפרעה אלקטרומגנטית או הפרעה אחרת בעת הפעלת המכשיר. הזזת המכשיר למקום אחר עשויה לנטרל את ההפרעה.

● אין להשליך את המכשיר או את הסוללה עם פסולת ביתית! למידע נוסף עיינו בסעיף 12.
מחזור.

2. התוויות נגד

המכשיר לא נועד לשימוש בילדים, במבוגרים שיש להם מוגבלות פיזית, תחושתית או מנטלית, או באנשים שחסר להם ניסיון או ידע בהפעלת המכשיר באופן בטיחותי, או באנשים שאינם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.

⚠ אין להשתמש במכשיר אם:

● יש לכם קוצב לב או דפיברילטור פנימי, או כל שתל חשמלי פעיל אחר במקום כלשהו בגוף.

● אתם סובלים ממחלה של המערכת האנדוקרינית שאינה מאוזנת כראוי, כגון סוכרת או בעיות בבלוטת התריס.

● סבלתם בעבר מסרטן עור, או שאתם סובלים כעת מכל סוג אחר של סרטן, או אם יש לכם שומות טרום-סרטניות.

● עברתם טיפולי קרינה או כימותרפיה בשלושת החודשים האחרונים, או אם יש לכם אזורים עם ממאירויות פוטנציאליות בעור.

● אם המערכת החיסונית שלכם מוחלשת עקב מחלה כגון עומס נגיפי של HIV, או עקב שימוש בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית.

● אם השתמשותם באיזוטרטינואין (רואקוטן) ב-6 החודשים שקדמו לטיפול.

● אתם סובלים ממחלה הקשורה לרגישות לאור, כגון פורפיריה, PLE (Polymorphic Light Eruption), סרפדת שמש, זאבת (לופוס) וכדומה.

● אתם סובלים מאפילפסיה.

● אם אתם בהריון או מניקה.

● אתם סובלים מבעיות עור שנגרמו מסוכרת או ממחלות רב-מערכתיות או מטבוליות אחרות.

⚠ **אין להשתמש במכשיר על אזורים שיש בהם:**

● שתל קבוע כגון לוחות מתכת וברגים, שתלי סיליקון, או אזורים שהוזרקו בהם מילוי או רעלים.

● בעיה פעילה כלשהי באזור הטיפול כגון פצעים, פסוריאזיס, אקזמה, פריחה, חתכים פתוחים, שפשופים או נגעים.

● עור פצוע או חבול.

● עור שנחשף לאחרונה לשמש בלי אמצעי הגנה (יש להמתין יום אחד); במקרה של עור שזוף או שרוף, יש להמתין 3 ימים.

● אזורים בהם עברתם ניתוח כלשהו בשלושת החודשים שקדמו לטיפול.

● קעקועים.

● שיער ארוך או סמיך. השימוש במכשיר עלול לגרום לשטפי דם קלים.

⚠ **יש להיוועץ ברופא במקרים הבאים:**

● אם השתמשותם בסטרואידים בשלושת החודשים שקדמו לטיפול.

● אם אתם סובלים מרוזציה.



אם סבלתם בעבר ממחלות המתפרצות בעקבות חום באזור הטיפול, כגון זיהום חוזר של הרפס סימפלקס. במקרה כזה, תוכלו להשתמש במכשיר רק לאחר נקיטת אמצעים למניעת התפרצות המחלה.



אם השתמשתם בתרופות לעור שניתנו במרשם רופא בששת החודשים האחרונים.



אם יש לכם היסטוריה של מחלות עור, הצטלקות יתר (צלקת קלואידית), ריפוי לא תקין של פצעים, או עור מאוד יבש ועדין.



כל מצב אחר שבגללו, לדעת רופא המשפחה או רופא העור שלכם, הטיפול לא יהיה בטוח עבורכם.

3. אמצעי בטיחות

המכשיר כולל את הרכיבים הבאים, שנועדו להגן על עורכם מפני התחממות יתר.



חיישן חום ומייצב חום: מודדים את טמפרטורת העור, מייצבים את אנרגיית החום ומונעים התחממות יתר. כאשר טמפרטורת העור מגיעה ל- 43°C , המייצב מפסיק באופן אוטומטי את פליטת החום עד שטמפרטורת העור יורדת מספיק כדי לאפשר למייצב לחדש את החימום.



חיישן תנועה: חיישן זה דואג שהמכשיר יפלוט חום בתדר רדיו (RF) רק כאשר אתם מניעים את המכשיר על פני העור.

4. הכירו את המכשיר

4.1 תיאור המכשיר

זהו מכשיר לטיפול אנטי-אייג'ינג לפנים, הפועל באמצעות טכנולוגיה שנקראת Home Technology™. טכנולוגיה זו משלבת שלושה סוגי אנרגיה: קרינת חום (תת-אדום רחוק – Far IR) שמשפיעה על השכבה העליונה של העור במטרה לשפר את מרקם העור, טיפול בלייזר בעוצמה נמוכה (LLLT) שפועל על שכבת העור (דרמיס) כדי לחדש ולשקם את הקולגן, ואנרגיית תדר רדיו דו-קוטבי (Bi-Polar RF) שחודרת עמוק לתוך השומן התת-עורי כדי להדק את הרקמות העמוקות ולהפחית קמטים.

המכשיר כולל שטח טיפול עם 3 אלקטרודות, וכפתור הפעלה שסביבו 5 נוריות חיווי. המכשיר מגיע עם סוללה נטענת המאפשרת שימוש אלחוטי, וכן ספק כוח לחיבור המכשיר לחשמל.

4.2 למה מיועד המכשיר?

זהו מכשיר ידני ללא מרשם רופא המיועד להפחתת זמנית במראה של קמטים קלים עד בינוניים בפנים, ולהידוק העור. המכשיר נועד לשימוש עצמי בבית ואינו מתאים למטרות מסחריות. אין להשתמש במכשיר לשום מטרה מלבד זו שמתוארת במדריך זה.

4.3 תכולת האריזה

- מכשיר ה-Silk'n שלכם
- ג'ל של Silk'n
- ספק כוח AC/DC
- מדריך למשתמש
- מדריך מקוצר
- חוברת אחריות

4.4 חלקי המכשיר

עיינו בתרשים בעמוד (i) שבחזית מדריך זה כדי לראות את המיקום של כל פונקציה.

- שטח הטיפול (#1)
- אלקטרודות (#2)
- 4 נוריות (#3) חיווי של רמת האנרגיה
- כפתור הפעלה (#4)
- נורית חיווי מצב הסוללה (#5)
- שקע לספק הכוח (#6)
- ספק כוח עם כבל (#7)


4.5 הפעלה וחיווי

כפתור	פעולה	פונקציה/מצב
כפתור הפעלה (#4) 	לחיצה ארוכה אחת	מדליקה את המכשיר. רמת אנרגיה 1 - נורית אחת דולקת
	לחיצה קצרה אחת	רמת אנרגיה 2 - 2 נוריות דולקות
	לחיצה קצרה (פעמיים)	רמת אנרגיה 3 - 3 נוריות דולקות
	לחיצה קצרה (3 פעמים)	רמת אנרגיה 4 - 4 נוריות דולקות
	לחיצה קצרה (4 פעמים)	חזרה לרמת אנרגיה 1
נוריות החיווי של רמת האנרגיה (#3)	מראות את רמת האנרגיה שנבחרה.	מכבה את המכשיר
		יש נורית אחת עבור כל רמת אנרגיה. רמת האנרגיה הנמוכה ביותר היא רמה 1, והגבוהה ביותר היא רמה 4.

כפתור	פעולה	פונקציה/מצב
נורת חיווי מצב הסוללה (#5)	אור ירוק (מהבהבת)	טעינת המכשיר
	אור ירוק (דולקת באופן קבוע)	המכשיר טעון במלואו
	אור כתום (מהבהבת)	הסוללה חלשה
	אור כתום (דולקת באופן קבוע)	הסוללה התרוקנה; מצב טיפול אינו פעיל

4.6 טעינת הסוללה

- יש לטעון את המכשיר לפני השימוש הראשון.
- חברו את הכבל של ספק הכוח אל המכשיר, ולאחר מכן חברו את ספק הכוח (#7) לחשמל. נורת חיווי מצב הסוללה (#5) תהבהב בצבע ירוק.

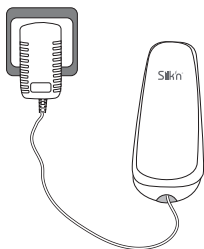

- מקמו את ספק הכוח כך שניתן יהיה לנתק בקלות את תקע החשמל.



i סמל הסוללה לא משנה את צבעו.

טעינה ראשונית



שעות

טעינה שגרתית



שעות

שימוש אלחוטי



דקות

i ניתן להשתמש במכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל. שימו לב שנורית חיווי מצב הסוללה (#5) תהיה כבויה.

5. בואו נתחיל!


5.1 אזורי טיפול

קיימים 6 אזורי טיפול בפנים ובצוואר. אנא עיינו במדריך המקוצר.

מטרה	אזור טיפול
הידוק העור	1. המצח: כולל האזור שבין הגבות
טיפול בקמטטים ובניית נפח	2. הלחי השמאלית: כולל האזור שמתחת לעין, אך לא ליד העין
	3. הלחי הימנית: כולל האזור שמתחת לעין, אך לא ליד העין
הידוק והעלמת קמטים	4. השפה העליונה: כולל הקמטים שבין האף לצידי הפה
הידוק והעלמת קמטים	5. סנטר: כולל קו הלסת
החלקת העור	6. צוואר

5.2 תוכנית טיפולים

- יש לטפל **בכל אזור** בנפרד למשך 15 דקות. ניתן לטפל בכמה אזורים שתרצו בטיפול אחד.
- להשגת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר שנוחה לכם.
- בצעו בעזרת המכשיר 2 טיפולים בשבוע למשך 10 שבועות. תוצאות נראות לעין יתחילו להופיע לאחר השבוע החמישי/10 טיפולים.
- לאחר מכן בצעו טיפול אחד פעם בשבועיים, כדי לשמור על התוצאות.

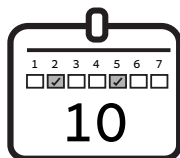

מספר טיפולים מומלץ

ליעילות מרבית:

- יש להקפיד ששטח הטיפול מכוסה בכמות מספקת של ג'ל **(#1)** לכל אורך הטיפול.
- אין להשאיר את המכשיר על נקודה אחת בעור. הקפידו להניע את המכשיר כל הזמן ולעבור איתו על אזור הטיפול כולו. כך תמנעו התחממות יתר של אזור הטיפול ותפחיתו את הסיכון לתופעות לוואי.
- הקפידו ששלוש האלקטרודות **(#2)** יהיו תמיד במגע מלא עם העור **(#1)**.
- אם רמת האנרגיה אינה נוחה לכם, הנמיכו אותה לרמה שבה תרגישו בנוח.
- החלפת רמת האנרגיה צריכה להתבצע רק כאשר שטח הטיפול **(#1) אינו** נמצא במגע עם העור.

5.3 למה לצפות מהטיפול

בזמן הטיפול ייתכן שתרגישו בתופעות הבאות, שהינן חלק מהפעולה הרגילה של המכשיר:

● תחושת חמימות

● אדמומיות או נפיחות קלה: תופעה זו אמורה לחלוף תוך כמה שעות, או לא יותר מיום אחד.

5.4 תופעות לוואי אפשריות

כל עוד ממלאים אחר ההנחיות במלואן ושמים לב לכל האזהרות, נדיר שיופיעו סיבוכים ותופעות לוואי. עם זאת כל טיפול קוסמטי, כולל טיפולים שנועדו לשימוש ביתי, כרוך בסיכון מסוים. לכן חשוב שתבינו ותקבלו על עצמכם את הסיכונים והסיבוכים שעלולים להיגרם.

● נפיחות יתר (בצקת) ואדמומיות הן תגובות נדירות לטיפול, אשר ברוב המקרים חולפות תוך כמה ימים. אם מופיעים סימנים אלה, השתמשו מיד במטלית לחה קרירה כדי לקרר את האזור למשך 15 דקות, ומרחו קרם נגד כוויות.

● במקרים נדירים תיתכן הרחבה של נימי הדם שעל פני העור. תופעה זו עלולה לגרום לאדמומיות זמנית למשך כמה ימים. בנוסף, ייתכן שיופיעו על העור נקודות אדומות, שגם הן יצטמצמו עם הזמן. אם מופיעים סימנים אלה, מומלץ לקרר את האזור מיד בעזרת מים צוננים.


i התייעצו עם הרופא שלכם אם אתם סובלים מתסמינים מתמשכים כולל כאב, אדמומיות בעור, נפיחות או תחושת צריבה.

6. הטיפול

1. הקפידו שעורכם יהיה נקי ויבש, והסירו את כל התכשיטים שלכם.
2. הוציאו את המכשיר ואת יתר הרכיבים מהקופסה.
3. הסירו את כיסוי המגן שמכסה את האלקטרודות (**#2**).
4. החליטו אם תרצו להשתמש במכשיר באופן אלחוטי או כאשר הוא מחובר לחשמל.
- **שימוש אלחוטי:** לפני תחילת הטיפול, ודאו שהסוללה אינה חלשה.
- **חיבור לחשמל:** חברו את הכבל של ספק הכוח (**#7**) אל השקע של ספק הכוח במכשיר (**#6**), ולאחר מכן חברו את ספק הכוח לחשמל.
5. **הדליקו את המכשיר: לחצו** לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (**#4**). המכשיר יידלק באופן אוטומטי על רמת אנרגיה 1, ותידלק נורית חיווי אחת של רמת האנרגיה (**#3**).
- i ודאו שתאריך התפוגה של הג'ל לא חלף.
6. מרחו שכבה דקה של הג'ל של Silk'n על שטח הטיפול.
- i הג'ל של Silk'n (או כל ג'ל צלול אחר על בסיס מים) תורם לתנועה חלקה של שטח הטיפול (**#1**) על פני העור ומאפשר מוליכות. כדי להבטיח שהטיפול יהיה בטיחותי ויעיל יש למרוח תמיד ג'ל בתחילת הטיפול, ולהוסיף עוד במידת הצורך.
7. כאשר המכשיר פועל ברמת אנרגיה 1, הניחו אותו על האזור שבו אתם רוצים לטפל. הקפידו שהמכשיר יהיה במגע מלא עם העור. תרגישו תחושה של חמימות קלה.
8. הניעו את המכשיר בתנועות עיסוי עדינות על פני אזור הטיפול. התקדמו לאט ובזהירות. המשיכו להניע את המכשיר כל הזמן, והקפידו ששלוש האלקטרודות יישארו במגע עם העור במהלך הטיפול.



9. טפלו **בכל** אזור במשך 15 דקות, כאשר המכשיר נמצא בתנועה מתמדת.
10. הגבירו בהדרגה את רמת האנרגיה. רמת האנרגיה הגבוהה ביותר תעניק לכם את התוצאות הטובות ביותר, אולם חשוב שתשתמשו ברמת האנרגיה שנוחה לכם באזור שבו אתם מטפלים.

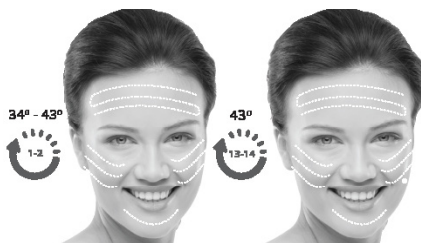

i עם הגברת רמת האנרגיה, תרגישו שטמפרטורת העור עולה. בדרך כלל לוקח למכשיר דקה אחת או שתיים להגיע לטמפרטורה הרצויה. בזמן הטיפול עורכם יאדים מעט. אל דאגה, זה נורמלי.

i הפסיקו מיד את הטיפול אם אתם חשים באי נוחות.

11. נסו להניע את המכשיר באיטיות על פני האזור שבו אתם מטפלים. אם אזור הטיפול מתחמם ואתם מרגישים לא בנוח, נסו להניע את המכשיר קצת יותר מהר.

12. **ניקוי אזור הטיפול:** הסירו מהעור את שאריות הג'ל, ולאחר מכן שטפו את העור במים פושרים. יבשו את העור במגבת ומרחו קרם פנים כדי להרגיע את העור ולהעניק לו לחות.

7. ניקיון, תחזוקה ואחסון

נקו את המכשיר לאחר כל טיפול.



אין לטבול את המכשיר או כל אחד מחלקיו במים!



העבירו את המכשיר למצב המתנה, ולאחר מכן נתקו אותו מהשמל.



השתמשו בנייר סופג (כגון נייר טואלט או מגבונים) כדי להסיר שאריות ג'ל משטח הטיפול **(#1)**. הקפידו להסיר את כל שאריות הג'ל כדי למנוע מהג'ל להתקשות ולגרום נזק למכשיר.



באמצעות מטלית נקייה ולחה, נקו את המכשיר ואת שטח הטיפול **(#1)**.



ניתן להשתמש בחומר ניקוי המכיל עד 70% אלקוהול, אך לעולם אין להשתמש באצטון או בחומרי ניקוי חריפים אחרים, כיוון שהם יגרמו נזק למכשיר.



לבסוף, יבשו את המכשיר ואת שטח הטיפול **(#1)** באמצעות מטלית נקייה ויבשה.



לאחר הנקיון אנו ממליצים לאחסן את המכשיר באריזתו המקורית. אחסנו את המכשיר ואת הג'ל במקום קריר ויבש.

8. איתור תקלות

אין לנסות לפתוח את המכשיר או לתקן אותו. אתם עלולים לחשוף את עצמכם לרכיבים חשמליים מסוכנים ולגרום לעצמכם נזק חמור. פעולה זו גם תבטל את תוקף האחריות.

בעיה	בדיקות שיש לבצע
המכשיר לא נדלק.	• חיבור לחשמל: ודאו שספק הכוח (#7) מחובר כהלכה למכשיר ולשקע החשמל, והקפידו ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (#4). • שימוש אלחוטי: ודאו שהסוללה אינה חלשה. אם הסוללה חלשה, חברו את המכשיר לחשמל כדי לבצע את הטיפול.
אינני מרגיש/ה שהמכשיר פולט חום, אף שלחצתי על כפתור ההפעלה (#4).	המכשיר פולט חום רק כאשר שטח הטיפול (#1) נמצא במגע מלא עם העור, ובתנאי שמרחתם ג'ל לפני ו/או בזמן הטיפול.
נורית אחת או יותר מהבהבת באופן קבוע.	אירעה תקלה בפעולת המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל ולאחר מכן הפעילו אותו מחדש.
המכשיר הפסיק לעבוד ונמצא במצב המתנה.	• חיבור לחשמל ושימוש אלחוטי: לחצו לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (#4) כדי לאתחל את המכשיר. • שימוש אלחוטי: ודאו שהסוללה אינה חלשה.

במקרה של בעיה או שאלה, אנא פנו אל שירות הלקוחות.

9. שירות לקוחות

למידע נוסף בקרו באתר שלנו www.silkn.co.il. במקרה של בעיה עם המכשיר, אנא פנו למוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל: contact@silkn.co.il, או בטלפון: 1-700-700-309.

10. חומרים מתכלים

ניתן לרכוש עוד ג'ל של Silk'n באתר שלנו: www.silkn.co.il.

11. אחריות

למידע המלא יש לעיין בחוברת האחריות שסופקה בנפרד.

i היצרן אינו אחראי לנזק או לפציעות שייגרמו עקב שימוש בלתי הולם או שימוש לא נכון במכשיר.

אם המכשיר שלכם סיים את חייו, הקפידו לפעול בהתאם לתקנות השלכת מכשירי חשמל.

● אין להשליך מכשירים ישנים עם פסולת ביתית!

● אם בשלב כלשהו לא ניתן יהיה עוד להשתמש במוצר, השליכו אותו בהתאם לתקנות התקפות במקום מגורכם. כך תבטיחו שמכשירים ואריזות ישנים ימוחזרו באופן מקצועי ותמנעו השלכות שליליות על הסביבה.

● אין להשליך לפח עם פסולת ביתית! על פי תקנות מחזור מוצרי חשמל (WEEE), יש למחזר מכשיר חשמלי זה (כולל כל האביזרים והחלקים) בנקודת איסוף ייעודית למחזור מכשירי חשמל. כך תמנעו שחרור של חומרים מזיקים* לסביבה. לפני מחזור המכשיר, ודאו כי לא השארתם אותו במצב טעון.

* סימני החומרים המזיקים במוצר: Cd = קדמיום, Hg = כספית, Pb = עופרת.



14. סימנים וסמלים

הצהרה או אירוע המעידים על סכנה או בעיה אפשרית/צפויה שעלולה להתרחש בזמן השימוש במכשיר.	
מידע חשוב בנוגע לשימוש או תחזוקה של המכשיר.	
מוצרים המסומנים בסמל זה ממלאים את דרישות הנחיות האיחוד האירופי.	
המכשיר אינו מאפשר חדירה של עצמים בקוטר של יותר מ-2.5 מ"מ, כגון אצבעות, כדי להגן מפני התחשמלות.	IP32
אין להשליך לפח עם פסולת ביתית! יש להשליך בהתאם לתקנות הסביבה, כדי לסייע בהגנת הסביבה. בהתאם להנחיות WEEE (השלכת פסולת אלקטרונית).	
מכיל ליתיום-יון.	

הסוללה הנטענת המובנית מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. יש להשליך בהתאם לתקנות המקומיות.	
ייתכן שתיגרם הפרעה בסביבת הציוד.	
רמת הגנה מפני התחשמלות: חלק מיושם מדירוג BF.	
תאריך ייצור.	
יצרן.	
המספר הסידורי של המוצר.	
יש לקרוא את ההוראות.	

i מכשיר זה אינו מתאים לשימוש בקרבת תערובת דליקה של חומרי הרדמה עם אוויר, או עם חמצן או חמצן דו-חנקני.


15. מפרט טכני

H2120	מס' דגם
468 ± 5 מ"מ ²	אזור הטיפול
Home Tightening™	טכנולוגיה
$20 \pm 630 \text{nm} \pm 20 \text{nm}; 45 \pm 9 \text{mW}$ ד"מ ²	אור אדום (אורך גל; עוצמת פלט אופטי)
$20 \pm 850 \text{nm} \pm 20 \text{nm}; 57 \pm 11 \text{mW}$ ד"מ ²	תת-אדום רחוק (Far IR) (אורך גל; עוצמת פלט אופטי)
$10 \text{W}; 1 \text{MHz} \pm 30\%$ מקסימום	תדר רדיו (RF) (תדר; עוצמת פלט מרבית)
מייצב חום המונע התחממות יתר של העור	הפעלה ובטיחות
150 גרם	משקל המוצר
30 דקות	הזמן הנדרש למכשיר להגיע מטמפרטורת האחסון המינימלית לטמפרטורת ההפעלה המינימלית, כאשר טמפרטורת הסביבה היא 20°C
30 דקות	הזמן הנדרש למכשיר להגיע מטמפרטורת האחסון המקסימלית לטמפרטורת ההפעלה המקסימלית כאשר טמפרטורת הסביבה היא 20°C
טמפרטורה: -40° עד $+70^\circ\text{C}$ אחוזי לחות: 10% - 90% לחץ אטמוספרי: 500 - 1060 hPa	תנאים סביבתיים בעת הובלה ואחסון של המכשיר בין טיפולים

טמפרטורה: 10°C - 35°C אחוזי לחות: 30% - 75% לחץ אטמוספרי: 700 - 1060 hPa		תנאים סביבתיים בעת הפעלת המכשיר
KSA24A1200150HE כניסה: 100-240VAC 50-60 Hz, 0.5A יציאה: 12V, 1.5A		ספק כוח דירוג
IEC 60601-1 (בטיחות) IEC 60601-2-2 (תדר גבוה) IEC 60601-1-2 (EMC) IEC 60601-1-11 (סביבה) IEC60601-2-57 (בטיחות מקורות שאינם לייזר)		המכשיר נבדק והוא עומד בדרישות התקנים הבאים
5 שנים		אורך החיים הצפוי של המכשיר
ICR18650-26H	דגם	סוללת ליתיום-יון נטענת
3.7Vdc	מתח נומינלי	
2600mAh	קיבולת נומינלית	

16. עקומות הספק מוצא

הגרף מציג את עוצמת תדר הרדיו של המכשיר (עבור כל מצבי הפעולה) לעומת התנגדות העור המטופל.

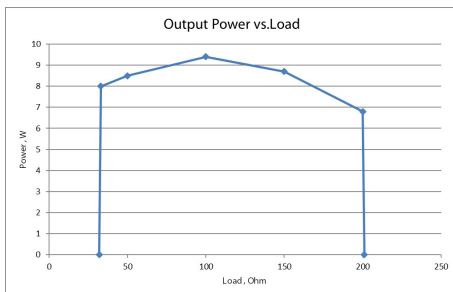

17. תוצאות בדיקות תאימות אלקטרומגנטית

EMC requirements

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014)

Environment of intended uses:

Home Healthcare Facility Environment

Summary of Test Results

Test	Standard	Class/ Severity level	Test result
Emission (IEC 60601-1-2 section 7)			
Radiated emission Freq. range: 30 - 1000 MHz	CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Immunity (IEC 60601-1-2 section 8)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV contact discharges & 15 kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz	Complies
Immunity from Proximity field from wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	List of frequencies, from 9 V/m up to 28 V/m, PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz	Complies
Immunity from power frequency magnetic field	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50 Hz	Complies



PB118610A



contact@silkn.co.il
www.silkn.co.il